



# どこでも持ち運んで使用できる ゼロハイリフト

ロングセラー  
商品!!

[ZHW-150]

## 電気不要の段差解消リフト 足踏み式「ゼロハイリフト」

- ・足踏み式で電源いらず
- ・車輪付きだから運搬可能据置式
- ・介護保険レンタルOK
- ・昇降100~680mm



手すり(1本)  
2本目からはオプション  
(後付け可能)

折りたたみ可能なアウトリガー  
昇降時に開いて使用することで安定します。また下部にねじ式調整が付いているため軽微な傾斜でも平行を保つことができます。


680  
100

油圧ジャッキ

移動用キャスター  
折りたたみ時の持ち運びが容易です。



下降ペダル  
踏み込んでいる間に下降します

スロープ 兼 落ち止め  
W127×D500サイズの差し込み式  
スロープとしては挿す角度を変える  
ことで使用できます。

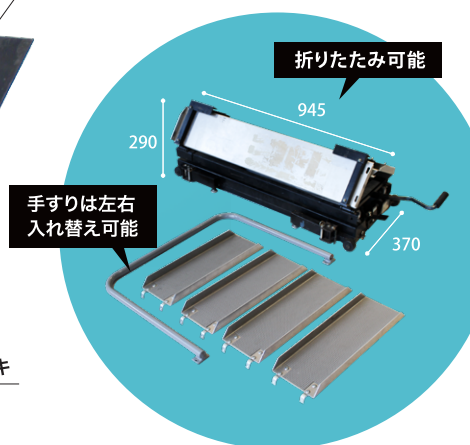

上昇用 足踏みペダル 兼  
移動用ハンドル(取り外し可能)  
踏み込み回数に応じて上昇します。折りたたみ  
時はハンドルとして使用。取り外し可能です。

折りたたみ時の寸法

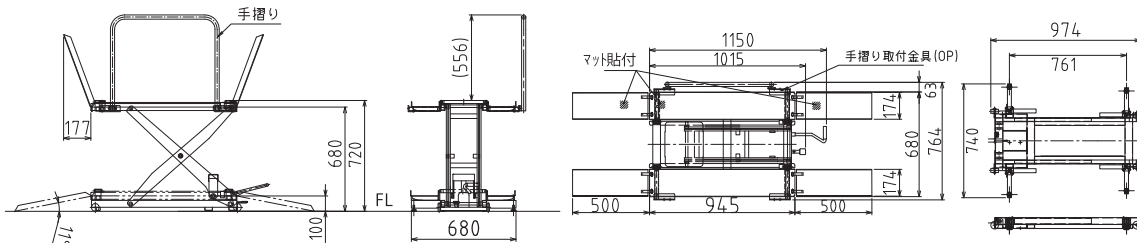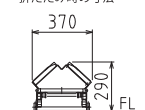

### PRODUCT SPEC

型式	… ZHW-150	テーブル高さ	… H100-680
定員	… 1名	テーブル寸法	… W680×D945
対象車いす	… 標準型車いすのみ ※1	外形寸法	… 図面参照
使用方法	… 移動式	その他寸法	… W370×D1025×H290 (折りたたみ時)
屋外使用	… ○	自重	… 44.5kg
駆動式	… 足踏み油圧ジャッキ式	挟み込み防止	… -
消費電力	… なし	介護保険レンタル	… 対象
最大積載量	… 150kg		

標準付属品 … 手すり(1本)、スロープ兼落ち止め、上昇用 足踏みペダル 兼移動用ハンドル  
OPTION … 手すり(2本目)、延長ブリッジ

※1 リクライニング型および電動車いす・積載面から大幅にはみ出る車いすは使用できません。また許容荷重を守ってご使用ください。



#### 〈据付での利用〉

車椅子で室内より直接外に出られるよう設置。庭が狭いため、また使用頻度が少ないため、移動式のZHW-150を固定式として使用。乗り込み時の安定感を増すため、オプションとして手すりを取り付けた。



#### 〈移動式で車いす以外にも多目的に使用〉

新たに専用の出入口を作り、リフトを設置した。雨対策として、移動用のZHW-150を採用。これによって不用の時は倉庫に格納しておくことができ、またどこでも使用出来るので、多目的に使用している。



製品動画  
PRODUCT VIDEO

**HANAOKA**  
HANAOKASHARYO CO.,LTD  
TOKYO,JAPAN

TEL/FAX 東京 03-3643-5271/03-3643-4886  
大阪 06-6305-3322/06-6305-5013  
名古屋 052-683-7351/052-683-7352  
MAIL sales@hanaoka-corp.co.jp